

# Concentrador fijo Respironics EverFlo

**Manual para el paciente**



# EverFlo

El concentrador de oxígeno EverFlo está diseñado para obtener del aire oxígeno en concentraciones mayores a las existentes en el ambiente suministrándolo al paciente mediante inhalación. Este tipo de tratamientos está dirigido a pacientes que sufren de insuficiencia respiratoria.

Nuestro personal le configurará el concentrador EverFlo (según prescripción médica) y le indicará cómo utilizarlo. Usted no debe cambiar la configuración del flujo.

Para cualquier cuestión sobre el funcionamiento o configuración del aparato contacte con nosotros en el 902 22 11 00.

## Precauciones generales



### Instrucciones

Respete las instrucciones de utilización tal y como le ha explicado nuestro personal.



### Equipo

Tenga cuidado de no obstruir de forma accidental o involuntaria, la salida de aire o cualquier otra apertura del aparato o del circuito respiratorio. Mantenga el concentrador a una distancia mínima de 30 cm de paredes, muebles y especialmente de cortinas que puedan impedir el flujo adecuado de aire.

Utilice el concentrador en un lugar ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado y pequeño (como por ejemplo, un armario).

No trate de desmontarlo bajo ningún concepto. Las reparaciones sólo las debe efectuar nuestro personal.

Si se enciende una alarma (luz amarilla o roja), apague y vuelva a encender el aparato. Si aún persiste la alarma, póngase en contacto con nosotros en el 902 22 11 00.

Tenga cuidado de no pinzar los cables de alimentación.

No lo limpie cuando esté enchufado.

No utilice el aparato si la toma de corriente o cable de conexión a la corriente están dañados.

Tenga en cuenta que los cables eléctricos y/o los tubos pueden suponer un peligro de estrangulación o tropiezos.

Utilice el pasamanos cuando suba o baje escaleras.



**Bombona de oxígeno**  
Tenga presente las indicaciones referentes a la bombona de oxígeno que le ha suministrado nuestro personal.

Únicamente deberá usar la bombona de oxígeno en caso de funcionamiento anómalo del equipo, falta de luz, avería del transformador, etc.

Mantenga la bombona de oxígeno alejada del calor y del fuego.



**Inflamable**  
No fume ni encienda fuego (fogones, estufas de butano, etc.) mientras utilice el aparato.

No aplique ninguna materia grasa (vaselina, cremas, pomadas, etc.) en el rostro antes de utilizar el concentrador.

No use ni aceites ni grasas en ninguna de sus piezas.

No utilice aerosoles (laca, desodorante, etc.) ni disolventes (alcohol, perfume, etc.) mientras tenga el equipo en funcionamiento.



#### **Líquidos**

Aleje el concentrador de cualquier fuente de agua (excepto del humidificador).




#### **Revisión y anomalías**

Deje de utilizar el concentrador y contacte con nosotros en el 902 22 11 00, si observa alguna de las siguientes situaciones:

- Cambios inexplicables en el rendimiento del aparato.
- Sonidos inusuales o violentos.
- Si el equipo o el cable de conexión a la corriente se han caído o manipulado incorrectamente.
- Si se ha derramado agua dentro del aparato.
- Si el equipo está roto.

Inspeccione periódicamente los cables eléctricos para comprobar si existen daños o signos de desgaste. En caso afirmativo, no utilice el concentrador y contacte con nosotros en el 902 22 11 00.

# Piezas

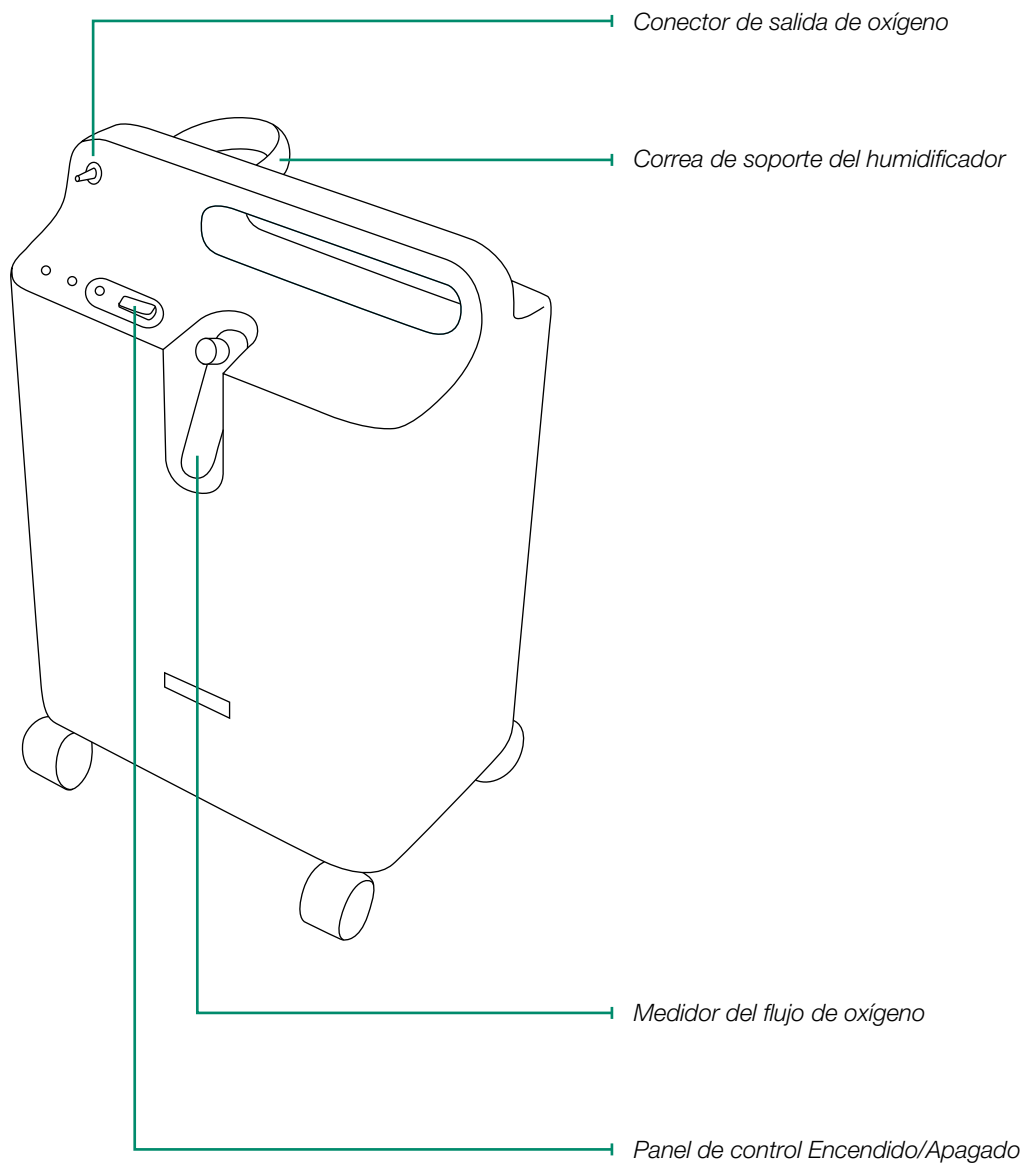

# Utilización del EverFlo



1. Acople el tubo de las gafas nasales directamente al conector de salida de oxígeno del aparato.


*Paso 1. Conexión de las gafas nasales a la salida de oxígeno*



Si el médico le ha prescrito el uso del humidificador:

- Llénelo con agua destilada hasta la mitad (o **hasta la línea que indica el nivel máximo**) y ciérrelo.
- A continuación acople un extremo del tubo conector del humidificador a la parte superior del humidificador y el otro extremo al conector de salida de oxígeno. Posteriormente conecte las gafas nasales a la salida lateral del humidificador.

*Paso 1. Conexión de las gafas nasales al humidificador*

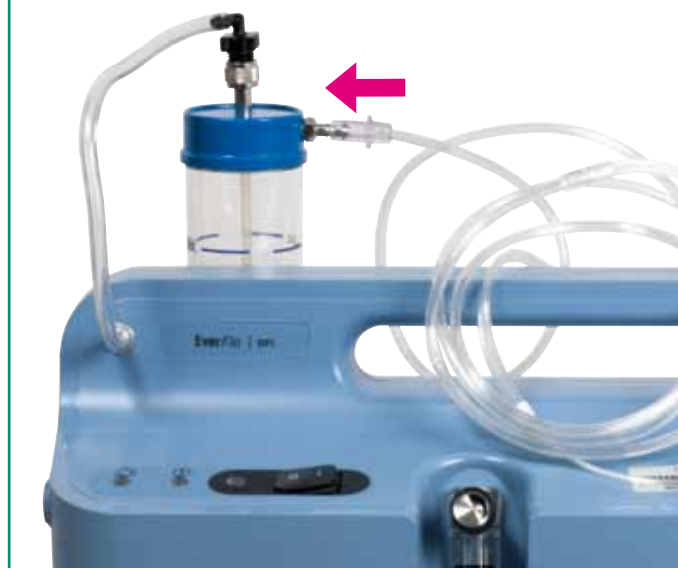

**2.** Ponga en marcha el aparato apretando la posición de Encendido [I] del interruptor. Al principio, unas luces se iluminarán y la alerta sonará durante unos segundos. Después, sólo la luz de color verde debe permanecer encendida. Cada vez que se pone en marcha, el aparato comienza rápidamente a producir niveles de concentración de oxígeno elevados, pero no alcanza la pureza especificada durante los primeros 10 minutos. Sin embargo ya puede utilizar el equipo inmediatamente después de encenderlo.



**3.** Si de forma excepcional debe ajustar usted mismo el flujo según le prescribió su médico, gire la perilla ubicada en la parte superior del equipo hasta que la bola se centre en la línea de flujo prescrita.




**4.** Asegúrese de que el oxígeno fluya a través de las gafas nasales. De lo contrario, revise el tubo para verificar que no existan pinzamientos que obstruyan el paso del oxígeno.

**5.** Colóquese las gafas nasales como le indicó nuestro personal.

**6.** Cuando no utilice el aparato, apáguelo apretando la posición de Apagado [O] del interruptor.

Si se requiere, nuestro personal le instalará un tubo para las gafas nasales de 15 metros. Esto le permite moverse de sitio libremente vigilando de no obstruir el tubo.



# Mantenimiento del EverFlo

## Cuerpo principal

**Precaución:** Desconecte **siempre** el concentrador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato.

Para proceder a la limpieza del aparato siga los siguientes pasos:

**1.** Limpie **una vez al mes como mínimo** el exterior con un paño ligeramente humedecido con agua y detergente neutro. Deje secar completamente antes de volver a conectarlo a la corriente.

**2.** Inspeccione el aparato después de su limpieza. Si detecta alguna anomalía contacte con nosotros en el 902 22 11 00.

## Humidificador

Si utiliza el humidificador lávelo **diariamente** en una solución de agua tibia y detergente neutro.

Cambie el agua destilada **diariamente**.





**ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, S.L.**

Av. Diagonal, 567, planta 3ª Edif. L'illa · 08029 Barcelona

Tel: 93 446 60 00 · Fax: 93 446 63 88

[www.estevetejin.com](http://www.estevetejin.com)