

Unidad estática de oxígeno líquido Caire Liberator 30

Manual para el paciente



Liberator 30

El sistema de oxígeno líquido Liberator 30 está diseñado para suministrarle el oxígeno suplementario que le haya prescrito su médico (oxigenoterapia). Está indicado para tratamientos domiciliarios de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.

Liberator 30 está diseñado para uso estático, por lo tanto, puede tomar oxígeno directamente desde él. También sirve para almacenar oxígeno líquido con el fin de llenar una unidad portátil. La unidad estática Liberator 30 debe ser llenada por nuestro personal.

Precauciones generales



Instrucciones

Respete las instrucciones de utilización tal y como le ha explicado nuestro personal.



Temperatura

El aparato contiene oxígeno líquido extremadamente frío (a unos -180°C). Una eventual exposición al oxígeno líquido puede provocar congelación grave.



No fumar

No fume mientras la unidad esté en funcionamiento.



Electricidad

No la utilice ni la guarde a menos de 1,5 metros de aparatos eléctricos, en especial hornos, calefactores, tostadoras y secadores de pelo.



Prescripción médica

Utilice el aparato únicamente según las prescripciones de su médico.




Almacenamiento

Guarde la unidad en un sitio cubierto, nunca al exterior.



Inflamable

No la utilice ni la guarde en una zona donde haya materiales combustibles como aceites, grasas, aerosoles, lociones grasas o disolventes.

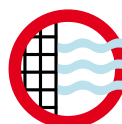

Ventilación

Manténgala en una zona bien ventilada.



Accidentes

Si se vuelca accidentalmente, vuelva a colocarla en posición vertical rápidamente pero con mucho cuidado. **Si se escapa oxígeno líquido, abandone la habitación inmediatamente y póngase en contacto con nosotros en el 902 22 11 00.**



No tocar


No toque las piezas congeladas del aparato.




Contacto

Si nota que el equipo no funciona correctamente, póngase en contacto con nosotros en el 902 22 11 00. No intente reparar ni ajustar la unidad usted mismo.


Piezas

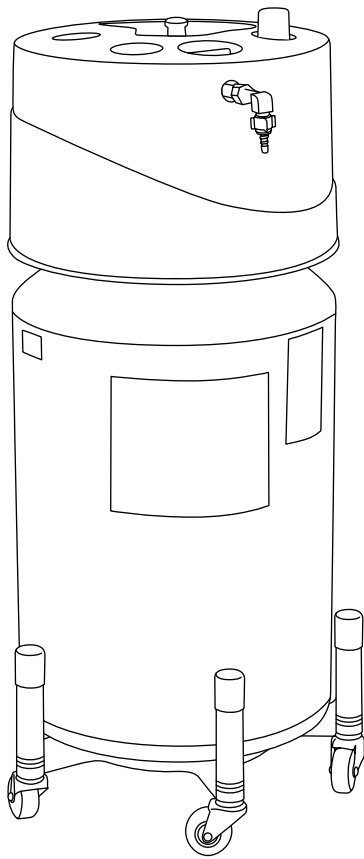

Cuerpo principal

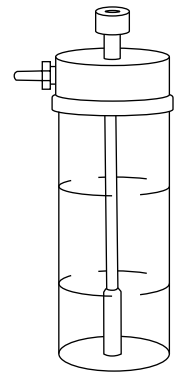

Humidificador (opcional)

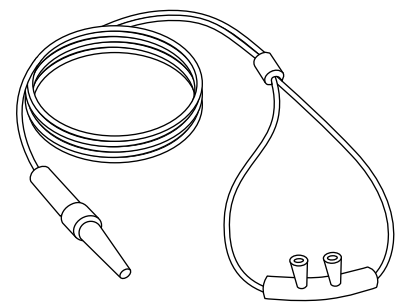


Gafas nasales

Utilización del Liberator 30



1. Para comprobar el nivel de oxígeno líquido de la unidad siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón (conmutador de control de nivel de líquido) de la parte superior durante al menos dos segundos.
- Consulte la barra luminosa que indica el nivel de contenido. Si queda poco oxígeno, contacte con nosotros en el 902 22 11 00.

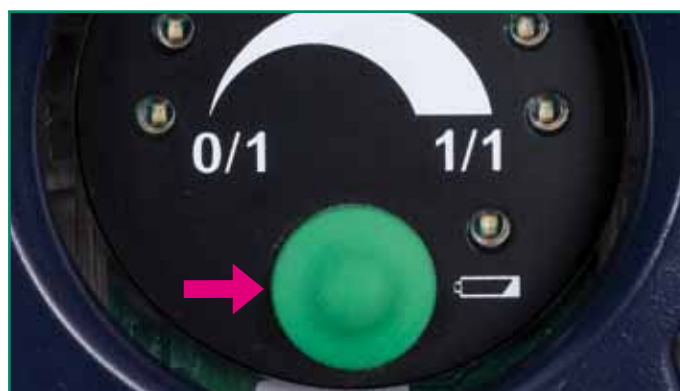

Paso 1. Pulsar botón de control de nivel de líquido

Atención: Si sólo se enciende el último segmento de la barra luminosa, significa que el equipo está vacío.

Si el indicador de batería baja se enciende al pulsar el botón, infórmenos en el 902 22 11 00.



Indicador de batería baja

Nota: El aparato seguirá suministrando oxígeno aunque se encienda el indicador de batería baja, siempre y cuando haya oxígeno líquido en la unidad.

2. Conecte las gafas nasales a la salida de oxígeno de la unidad estática.

Paso 2. Conexión de las gafas nasales



3. Si su médico le ha prescrito el uso del humidificador, llénelo con agua destilada **hasta la línea de nivel máximo**.

- Acople las gafas nasales (o mascarilla) al conector del tubo de oxígeno del humidificador.

Paso 3. Conexión del tubo de oxígeno al humidificador



Atención: Recuerde que debe cambiar el agua destilada del humidificador **cada día**.

4. Gire el botón de control del flujo en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el flujo que le ha prescrito su médico.




Paso 4. Ajuste del flujo

Atención: Para asegurar la medida del flujo correcta, compruebe que las conexiones están bien ajustadas y que no hay fugas.


5. Colóquese las gafas nasales (o mascarilla) en la posición adecuada para poder respirar con comodidad.

6. Ahora comenzará a recibir oxígeno.

7. Para apagar el equipo gire el botón de control del flujo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "0".

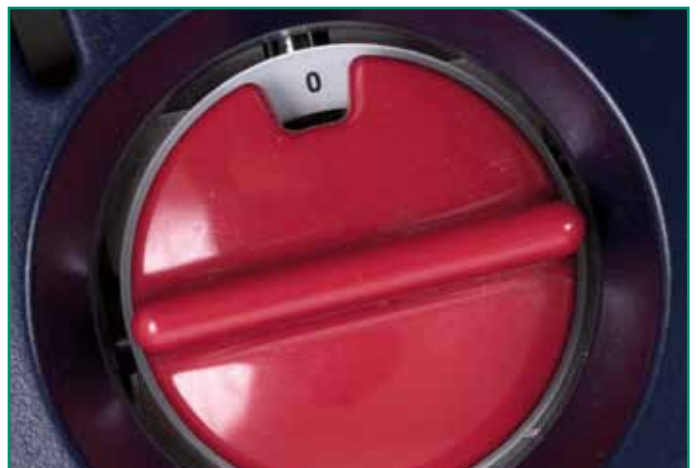

Paso 7. Apagado del flujo

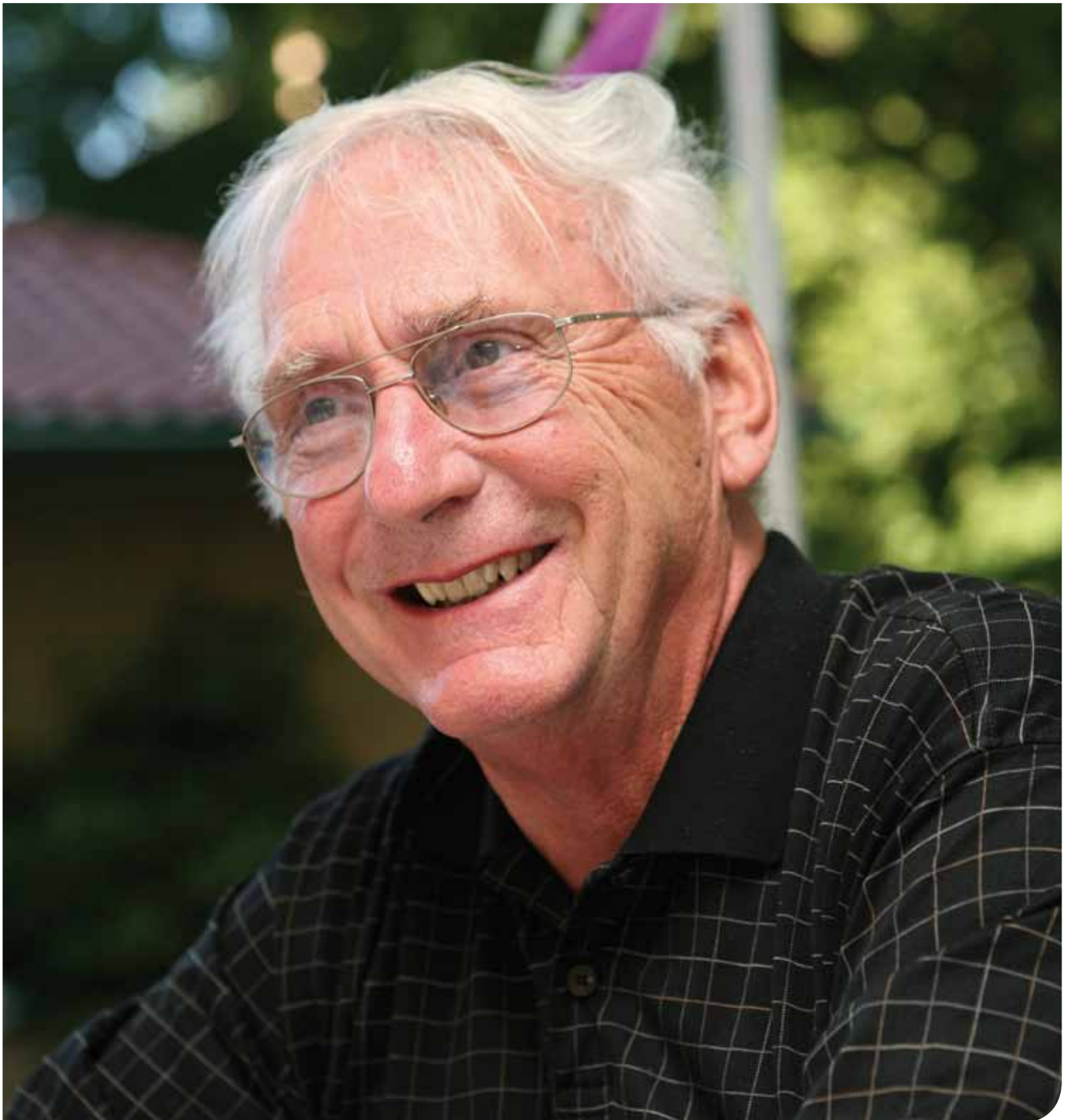



ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, S.L.

Av. Diagonal, 567, planta 3ª Edif. L'Illa · 08029 Barcelona

Tel: 93 446 60 00 · Fax: 93 446 63 88

www.estevetejin.com